

Gebrauchsanweisung: Information für Anwender

Wie kam es zur Entwicklung der Flutees Schutzhülsen für Ohrstecker?

Flughafen Rom, im frühen Sommer 2011. Mein Mann bestand darauf, wie es auch heute noch seine Art ist, wenigstens drei Stunden vor unserem Rückflug nach Köln am Flughafen zu sein. Um ehrlich zu sein, eine absolute Geduldsprobe für mich, denn ich gehöre genau zu der anderen Sorte Mensch. Nämlich der, die sich mit wehenden Fahnen an der Warteschlange vorbeischiebt, weil sie mal wieder viel zu spät losgefahren ist und dann befürchten muss, den Flug zu verpassen. Am Mittelweg arbeiten wir noch. Dies war jedoch ein „drei Stunden früher“ Tag. Also was tun mit der Zeit? Richtig – ein kleiner Bummel durch die Shopping Mall im Abflugbereich kann nicht schaden. Bei unserem Streifzug durch die Läden entdeckten wir dann ein wunderschönes Paar Modeschmuck-Ohrstecker. Auch wenn ich die Ohringe schön fand, so war ich doch skeptisch, ob ich sie würde tragen können. Denn seit meiner Jugend reagieren meine Ohrlöcher auf Modeschmuck- und Silberohrringe mit einem unangenehmen Juckreiz und fangen anschließend an zu nässen. Hinzu kommt, dass die Symptombehandlung viele Tage in Anspruch nimmt, in denen ich demütig mit roten Ohr läppchen ausharre und mir schwöre, nie wieder Modeschmuck- oder Silberohrringe zu tragen. Magisch angezogen von den schönen Stücken befanden wir uns dennoch kurze Zeit später in einem Gespräch mit der Verkäuferin. Auf Darstellung meines Problems erklärte uns die freundliche Dame, dass die Ohringe aus einem garantiert allergiefreien Material bestünden und ich die Ohringe ganz sicher tragen könne. So schenkte mir mein Mann dieses wunderschöne Paar Ohrstecker. Leider ließen sich meine Ohrlöcher von meiner Begeisterung nicht überzeugen, denn sie reagierten auch auf dieses allergiefreie Produkt mit einem unangenehmen Brennen und Nässen. Dies hat mich offengestanden ziemlich geärgert. Der Ärger saß so tief, dass ich einige Zeit später sogar davon geträumt habe. In meinem Traum erschuf ich eine Hülsenkonstruktion, die ich einfach über den Stab des Ohrsteckers führen konnte und die meine sensible Reaktion vermied, indem sie einfach den Kontakt zwischen dem Stab des Ohrsteckers und meinem Ohrloch verhinderte. Obwohl ich mich in der Regel nicht an meine Träume erinnern kann, so war mir dieser Traum am nächsten Morgen immer noch präsent – und er hat nun einen Namen: Flutees.

Ramona Mignon
Geschäftsführerin
Flutees Verwaltungsges. mbH


Diese Gebrauchsanweisung beinhaltet:

- Wofür sind die Flutees Schutzhülsen für Ohrstecker gedacht?
- Aus welchen Einzelteilen besteht die Flutees Schutzhülsenkonstruktion für Ohrstecker?
- Wie werden die Flutees Schutzhülsen angewendet?
- Was ist bei der Anwendung der Flutees Schutzhülsen unbedingt zu beachten?
- Welche Anwendungseinschränkungen gibt es?

Wofür sind die Flutees Schutzhülsen für Ohrstecker gedacht?

Flutees Schutzhülsen für Ohrstecker werden über den Stab eines Ohrsteckers geschoben und vermeiden auf diese Weise den Kontakt zwischen dem Metall des Ohrsteckers und dem Ohrloch. Durch die Vermeidung dieses Kontaktes kann Unverträglichkeiten wie Jucken, Brennen, Nässen oder auch Verfärbungen vorgebeugt werden.

Aus welchen Einzelteilen besteht die Flutees Schutzhülsenkonstruktion für Ohrstecker?

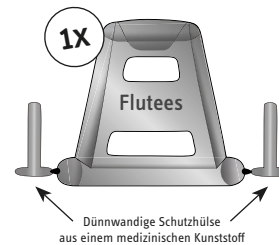

Wie werden die Flutees Schutzhülsen angewendet?


Schritt 1

Einschieben des Ohrsteckers in die Schutzhülse und Abdrehen der Hülse.




Schritt 2

Einführen des Ohrsteckers mit Schutzhülse in das Ohrloch.

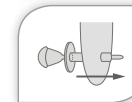


Schritt 3

Sichern des Ohrsteckers und der Schutzhülse durch Aufschieben des Verschlusses.

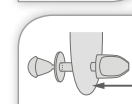


Der Verschluss ist so konstruiert, dass er sich beim Aufschieben fest um die Schutzhülse legt und gleichzeitig im hinteren Teil den Stab des Ohrsteckers fixiert. An den Verschluss muss man sich erst gewöhnen, da er nicht einrastet, sondern stufenlos verschleißt. Achten Sie darauf, wie bei herkömmlichen Verschlüssen auch, den Verschluss nicht zu feste an das Ohr läppchen zu schieben, damit die Haut atmen kann. Durch einen vorsichtigen Zug am Schmuckteil des Ohrsteckers stellen Sie fest, ob der Ohrstecker sicher gehalten wird. Je nach Stablänge des Ohrsteckers kann es sein, dass der Stab hinter dem Verschluss übersteht.

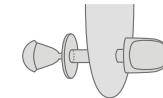

Hinweise:

Flutees Schutzhülsen für Ohrstecker sind ausschließlich für den gemeinsamen Gebrauch mit Ohrsteckern geeignet. Bitte verbiegen Sie die Hülse nicht und wenden Sie sie nicht zusammen mit Ohrhaken an.

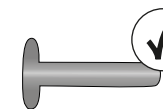

Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, die Flutees Schutzhülsen nicht öfter als ein Mal anzuwenden. Durch Feuchtigkeit und Fett wird die Haftung des Verschlusses reduziert. Dies tritt insbesondere bei mehrfacher Anwendung des Verschlusses auf. Ohrstecker mit schwerem oder langem Schmuckteil sollten nur mit frisch geöffneten Flutees Schutzhülsen getragen werden, ansonsten besteht die Gefahr, dass der Verschluss den Ohrhring nicht zuverlässig hält.

Was ist bei der Anwendung der Flutees Schutzhülsen unbedingt zu beachten?

- Verwenden Sie nur unbeschädigte Schutzhülsen aus einer intakten medizinischen Folienverpackung
- Verformen Sie das Produkt nicht, z.B. durch Verbiegen. Die Schutzhülsen könnten dadurch reißen und ihre Schutzfunktion nicht gewährleisten
- Kürzen Sie die Schutzhülsen nicht, z.B. mit einer Schere. Hierdurch könnten scharfe Kanten entstehen, die eine Verletzungsgefahr bergen

- Achten Sie darauf, dass die Schutzhülsen unbeschädigt sind. Nur so ist der Stab des Ohrsteckers zuverlässig von Ihrem Ohrloch abgesichert
- Wenn Sie dickere Ohrläppchen haben, vergewissern Sie sich durch Tasten, dass nach dem Einführen der Schutzhülse ein Teil der Schutzhülse hinter Ihrem Ohrläppchen zu fühlen ist. Wenn die Schutzhülse für Sie zu kurz ist und nicht hinter Ihrem Ohrläppchen zu ertasten ist, kann der Verschluss die Schutzhülse nicht umgreifen. So kann es zu einem Hautkontakt zwischen Ohrsteckerstab und ihrem Ohrloch kommen, der ggf. eine Reaktion auf das Metall des Ohrsteckers zur Folge hat
- Wenn die Flutees Schutzhülsen nicht oder nur schwer in Ihre Ohrlöcher einzuführen sind, verzichten Sie bitte ganz darauf
- Wenn der Ohrsteckerstab nur schwer oder gar nicht in die Flutees Schutzhülse einzuführen ist, verzichten Sie bitte ganz darauf. Sonst besteht die Gefahr, dass die Hülse reißt und ihre Schutzfunktion ist nicht gewährleistet
- Bei sehr empfindlichen Personen sollte der Schmuckteil des Ohrings nicht über die Abschirmscheibe der Hülse hinausragen. Sonst kann es sein, dass der Bereich des Ohrläppchens, der über die Abschirmscheibe hinaus geht, sensibel auf den Schmuckteil des Ohrsteckers reagiert



- Achten Sie immer darauf, dass Sie beim Entfernen der Ohrstecker aus Ihren Ohrlöchern auch die Schutzhülsen mit entfernen
- Entfernen Sie die Flutees Schutzhülsen mitsamt der Ohrstecker, wenn Sie ins Bett gehen
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern


Welche Anwendungseinschränkungen gibt es?

Ohrstecker sind nicht genormt. Nahezu kein Ohrstecker ist exakt wie der andere. Mal sind die Stäbe der Ohrstecker länger, mal dicker, manchmal sogar leicht konisch. Manche Ohrstecker haben Rillen an den äußeren Stabenden und bei manchen Ohrsteckern befindet sich eine Materialverdickung zwischen Schmuckteil und Stab. Optimal wäre es, Länge und Durchmesser der Flutees Schutzhülsen für Ohrstecker auf diese

individuellen Gegebenheiten anzupassen und die Schutzhülsen in verschiedenen Größen anzubieten. Allerdings sind wir der Auffassung, dass diese Unterschiede mit dem bloßen Auge nur sehr schwer zu erkennen, geschweige denn exakt festzustellen sind. Um unseren Kundinnen und Kunden diese „Maßarbeit“ zu ersparen, haben wir uns bei der Produktentwicklung für einen Mittelweg entschieden und eine Hüslengröße entwickelt, die auf die meisten Ohrstecker passt. Hierbei haben wir weiterhin darauf geachtet, den Außendurchmesser der Flutees Schutzhülsen so gering wie möglich zu halten und die Verschlusskonstruktion so ausgelegt, dass die Schutzhülsenkonstruktion bei einer möglichst großen Bandbreite an Ohrläppchenstärken noch zuverlässig schließt. Mit dieser Vorgehensweise können wir es vielen Anwenderinnen und Anwendern ermöglichen, auch einmal Ohrstecker zu tragen, auf die sie bisher möglicherweise aufgrund einer sensiblen Reaktion verzichten mussten.

Um Ihnen im Vorfeld die Möglichkeit geben zu können, möglichst umfassend zu prüfen, ob die Flutees Schutzhülsen ein Produkt für Sie sind, möchten wir Sie auf die folgenden Anwendungseinschränkungen hinweisen:

- Wenn Sie Ihre Ohrläppchen selbst als relativ dünn oder kräftig beschreiben würden, kann es sein, dass die Flutees Schutzhülsenkonstruktion nicht gebrauchsmäßig zu verschließen ist und Sie das Produkt nicht verwenden können
- Wenn Sie wissen, dass der Stab des Ohrsteckers, den Sie tragen möchten, einen Durchmesser von über 0,9 mm hat, können Sie die Flutees Schutzhülsen für diesen Ohrstecker nicht verwenden
- Wenn der Ohrstecker, den Sie mit den Flutees Schutzhülsen tragen möchten, eine ausgeprägte Verdickung zwischen Schmuckteil und Ohrsteckerstab aufweist, können Sie die Flutees Schutzhülsen für dieses Paar Ohrstecker nicht verwenden

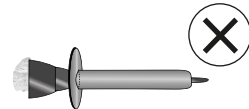

Da die Hülsenkonstruktion starr ausgelegt ist, lässt sie sich in diesem Fall nicht ganz bis an den Schmuckteil des Ohrsteckers heran schieben, so dass der Schmuckteil später vom Ohrläppchen absteht, was optisch nicht schön aussieht.

- Der Außendurchmesser der Flutees ist sehr gering, dennoch ist auch dieser kleine Durchmesser für manche Ohrlöcher zu groß. Bitte führen Sie die Flutees nicht mit „Druck“ in Ihr Ohrloch ein – tritt ein Widerstand auf, dürfen Sie die Flutees nicht verwenden!

- Oft tritt ein „Widerstand“ nicht beim Einführen im Ohrloch-Eingang auf, sondern beim Herausschieben am Ohrloch-Ausgang. Anwender/-innen, denen die Flutees passen, können diese von Anfang bis Ende ganz leicht und unproblematisch durch ihr Ohrloch schieben. Sollte hier ein Widerstand auftreten dürfen Sie die Flutees nicht verwenden

- Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Ohrloch trotz Schutzhülse anfängt zu brennen, zu jucken oder andere Reaktionen zeigt, entfernen Sie das Produkt bitte umgehend und verzichten Sie auf die Anwendung

Weitere Informationen und den Kontakt zu uns finden Sie unter www.flutees.de.

Ausgabedatum: 04/2014



Flutees Verwaltungsgesellschaft mbH
D-53501 Grafschaft

Erklärung der Zeichen auf der Verpackung:



Gebrauchsanweisung beachten



Nicht zur Wiederverwendung



Der Grüne Punkt



Kennzeichnung Medizinprodukt



Hersteller



Chargenbezeichnung



Verwendbar bis